

Gymna Cryoflow ICE-CT

Crioterapia con sistema de retroalimentación infrarroja para control de temperatura óptimo



Gymna Cryoflow ICE-CT

Demostrada eficacia para una rehabilitación más rápida de un traumatismo agudo

La crioterapia se ha utilizado durante siglos. Sin embargo, a estas alturas, los beneficios de esta terapia han sido científicamente probados. El dolor se reduce al ralentizar la velocidad de conducción nerviosa, el proceso de inflamación se ralentiza por una reducción en las reacciones metabólicas y enzimáticas y los espasmos musculares disminuyen debido a la disminución de la actividad del huso muscular.



REDUCCIÓN DEL DOLOR

1

Necesidad reducida de dolor medicamento

Tratamiento más eficaz opciones

ANTIINFLAMATORIO Y REDUCE LA INFLAMACIÓN

2

Evita la necesidad de rehabilitación a término

Regreso más rápido a actividad

RELAJACIÓN MUSCULAR

3

Estiramiento muscular mejorado por reducción de espasmos

ROM mejorada

= Rehabilitación más rápida




Aplicaciones adicionales: con espasticidad, pacientes con reumatismo, pre y postoperatorio, artrosis, recuperación tras esfuerzo, punto gatillo terapia, después de amputaciones ...



Gymna Cryoflow ICE-CT

Control de temperatura óptimo

El Gymna Cryoflow ICE -CT está equipado con una retroalimentación infrarroja única Sistema para una óptima regulación de la temperatura, que garantiza los máximos resultados.

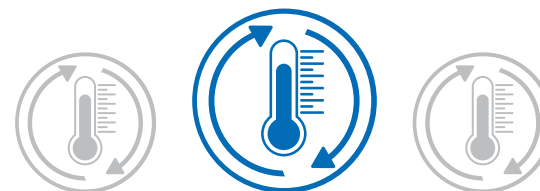

SISTEMA ÚNICO DE RETROALIMENTACIÓN POR INFRARROJOS

Medición continua de la temperatura cutánea mediante un sensor infrarrojo

El flujo de aire seajusta **automáticamente** para lograr y mantener el temperatura deseada

Resultados máximos :

Evita temperaturas demasiado altas: el efecto 0

Evita temperaturas demasiado bajas: el riesgo de congelación y daño a los nervios



POTENTE FLUJO DE AIRE

La **temperatura de la piel** desciende a 12 ° C en 1 minuto. por lo que se inician las reacciones metabólicas necesarias inmediatamente



Corta duración del tratamiento debido a una caída muy rápida a temperaturas bajas



Efecto de compresión, ofrece un tratamiento adicional. aplicaciones como el drenaje linfático mediante una combinación de barrido y compresión

Gymna Cryoflow ICE-CT

La crioterapia se realiza de forma eficaz y sencilla

EL GYMNA CRYOFLOW ICE-CT ESTÁ EQUIPADO CON SOLUCIONES INTELIGENTES PARA SU COMODIDAD:



Método de tratamiento dinámico



35 configuraciones preprogramadas basadas en indicaciones u objetivos



Fácil de usar ; sin recarga



Corta duración del tratamiento debido a la potente reducción de la temperatura.



Varias boquillas según la zona a tratar



2 métodos de tratamiento: estático y manos libres o dinámico y manual



Método de tratamiento estático

Varias boquillas:

Boquilla de 5 mm



Indicado para el tratamiento de puntos gatillo o puntos dolorosos.

Boquilla de 15 mm



Refrigeración local

Boquilla de 20 mm



Refrigeración local para áreas más grandes